

**2010年9月1日改訂(第5版)
*2010年6月10日改訂(第4版)

医療機器承認番号 22100BZX00144000

機械器具(06)呼吸補助器
JMDNコード: 70566000 呼吸回路セット
管理医療機器

NPB 呼吸回路セット (フラットパックフィルタ (3 個入))

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**本品はベンチレータの交換部品である。

1. 構成

製品番号	名称
Y-6109	フラットパックフィルタ (3 個入)

2. 原理

フラットパックフィルタは、ベンチレータに入るエアから、0.3 ミクロン以上の粒子を取り除く。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、ベンチレータアチーバプラスシリーズ用に設計されている。
＜性能＞

- (1) ベンチレータに入るエアから、0.3 ミクロン以上の粒子を取り除く。
吸気抵抗：流量 30Lpm 0.68 hPa(cmH₂O)
吸気抵抗：流量 60Lpm 1.35 hPa(cmH₂O)

【操作方法又は使用方法等】

1. フラットパックフィルタの交換

- (1) ベンチレータ背面パネルにあるフラットパックフィルタのリテーナリングを回して取り外し、フラットパックフィルタカートリッジを取り替える。
- (2) フィルタを交換する場合、フラットパックフィルタの後ろに入っている O-リングを紛失しないよう注意すること。右図のように、O-リング、フラットパックフィルタ、リテーナリングの順で組み立てる。

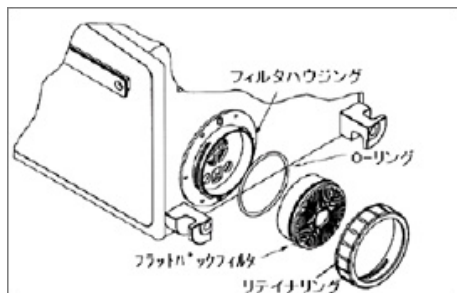


図1 フラットパックフィルタの交換

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品と併用する（特に接続する）医療機器に関しては、その医療機器に付属の添付文書・取扱説明書を参照すること。
- (2) 吸気フィルタが目詰まりしていると、設定エラーアラームが作動することがある。フィルタ交換を怠ると、ベンチレータの破損や、保証が無効になる可能性がある。
- (3) アチーバ製品を使用する場合は、必ずフラットパックフィルタを装着すること〔装着なしでの使用は、アチーバ本体の動作不良の原因になる可能性があるため〕。
- (4) 汚れたフィルタの交換を怠らないこと〔アチーバ本体に致命的な動作不良が発生する原因になる可能性があるため〕。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温、多湿、直射日光、紫外線を避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. **毎月（屋外や埃の多い場所で使用している場合や搬送時には毎週）フラットパックフィルタを点検すること。変色している場合は、新しいフィルタに交換すること。
2. フラットパックフィルタは、再使用できない。洗ったり、クリーニングしたりしないこと。

【包装】

1 袋 3 個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：
コヴィディエン ジャパン株式会社
〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

お問い合わせ先：

レスピラトリー事業部

札幌営業所	TEL (011)241-5418
仙台営業所	TEL (022)211-6422
東京営業所	TEL (03)5717-1440
名古屋営業所	TEL (052)709-6691
金沢営業所	TEL (076)232-4450
大阪営業所	TEL (06)6455-8900
広島営業所	TEL (082) 536-0170
高松営業所	TEL (087)868-2201
福岡営業所	TEL (092)271-0276

**外国製造業者名：

Covidien
(コヴィディエン)
アイルランド

Covidien
(コヴィディエン)
メキシコ合衆国(Baja California)

Covidien
(コヴィディエン)
メキシコ合衆国(Ciudad Juárez)